

TBS-150

TBL-300

インラボテックジャパン合同会社
東京都文京区湯島4-6-11 湯島ハイタウンA205

TEL : 03-4405-1703

FAX : 03-4405-1704

FILTER BOX



短時間で分解

パワフルファンで素早く空気清浄

Sサイズ



最大風量

3.95 M3/MIN

Lサイズ



最大風量

8.8 M3/MIN


用途により、 ピッタリな商品の カスタマイズ

一枚ずつ選べるフィルターの組み合わせ


使用用途によって必要なフィルターの種類が異なるため、様々な高品質のフィルターを提供いたします。最高効果を出すのに最大3種でご自由にフィルターの組み合わせを選択していただけます。（フィルターの種類は用途により、相談可能。）




HEPAフィルター

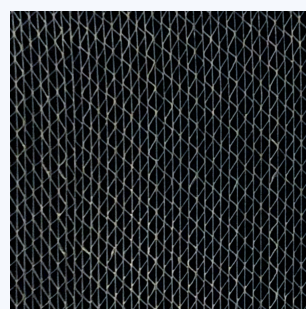

プラチナフィルター

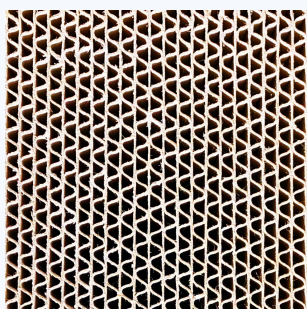

ゼオライトフィルター

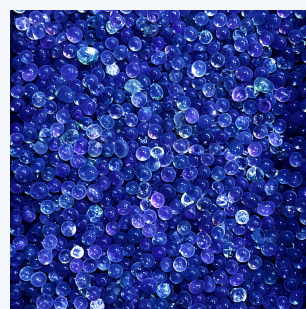

シリカゲルフィルター

便利な設計


2サイズで色んな用途に利用可能

小型の卓上タイプ、また、大型の床置きタイプ、2サイズの商品で安全キャビネットの狭い作業エリアから、広い試験室までご利用いただけます。



ポータブルで移動&取り回しが楽

小型の卓上タイプは軽い素材で持ちやすい形のため、色んな場所に持ち行きやすいです。大型の床置きタイプも軽い素材でハンドルとロック付きキャスターの設計で移動が簡単です。

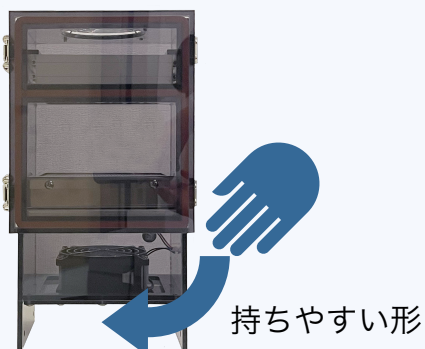


ロック付きキャスター&たためるハンドルで、大型でも移動が楽。

親切な仕組みで 手間がかからない

フィルターを更新・入れ替えしやすい

誰でも分かる構造でフィルターの更新、または、用途が変わるときのフィルター入れ替えは短時間で簡単にできます。

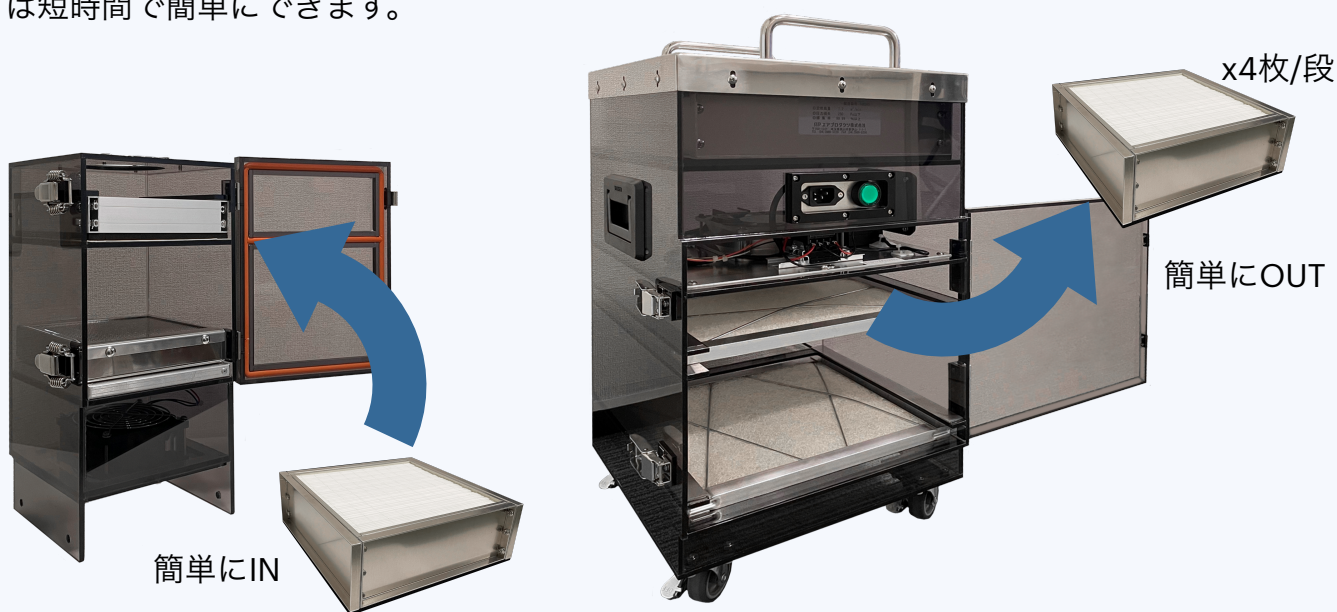

掃除、メンテまで簡単にできる

掃除しやすいポリカーボネート素材で、単純な構造のため、定期的な掃除も、メンテも楽に行えます。

仕様


ケース

	Sサイズ	Lサイズ
品番	TBS-150	TBL-300
サイズ (W x D x H)	165 x 165 x 320 mm	340 x 345 x 560 mm (キャスターなし) 340 x 345 x 625 mm (キャスター含み)
フィルタースロット* (W x D x H)	150 x 150 x 90 mm	300 x 300 x 50~120 mm (高さ調整可能)
最大フィルター組み合わせ	3種	3種
素材	ポリカーボネート	ポリカーボネート
最大風量	3.95 m ³ /min	8.8 m ³ /min
定格電圧 (ACアダプター)	100~240 V	100~240 V
消費電力	30 W	55.2 W
音圧レベル	69 dB	70 dB
運転温度範囲	0~50 °C	0~50 °C

*プレフィルター & HEPAフィルターが別のスロットに搭載されます。

フィルター各種

プレフィルター

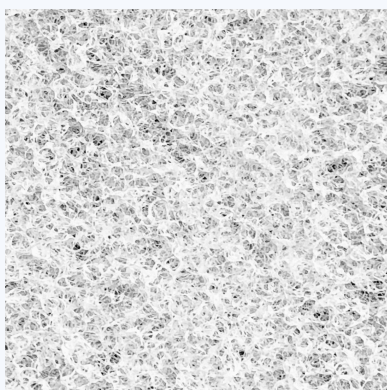

最初に大きな粉塵、粒子などを取って、専用フィルターの負担を減らすフィルターです。

対象物質：粉塵、粒子


HEPAフィルター



定格流量で粒径が0.3 μ mの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集効率をもつフィルターです。

対象物質：粉塵、粒子

ゼオライトフィルター

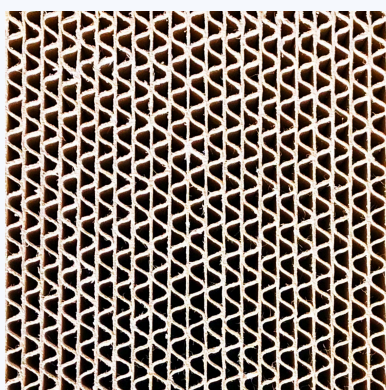

VOC、過酸化水素など、有機物の分解と脱臭ができるフィルターです。

対象物質：VOC、有機物、脱臭


活性炭フィルター



VOCなど、有機物吸着、脱臭、代表的な多機能フィルターです。


対象物質：有機物、脱臭、多機能

シリカゲルフィルター

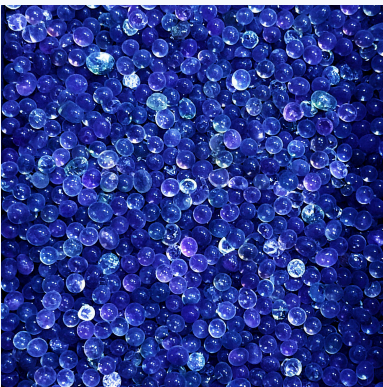

湿度吸着フィルターです。

プラチナフィルター

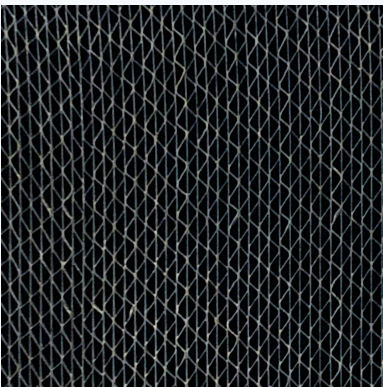

ホルムアルデヒド分解フィルターです。

対象物質：ホルムアルデヒド

光触媒フィルター

紫外線と触媒（酸化チタン）を反応させて空気中の不純物を除去するフィルターです。

対象物質：ウイルス、菌、カビ、脱臭

不織布タイプ

折りたたみ型でフィルターの表面積を増やして、効果的に空気を清浄します。



セラミックタイプ

セラミック材で、掃除が簡単で繰り返し使用できます。

